ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА ФИЗИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ им. ЛАНДАУ

Лабораторная работа № 2.4.1 Определение теплоты испарения жидкости

Плотникова Анастасия Александровна Группа Б02-406

Цель работы:

- 1) измерение давления насыщенного пара жидкости при разной температуре;
- 2) вычисление по полученным данным теплоты испарения с помощью уравения Клапейрона-Клаузиуса.

В работе используются:

термостат,

герметический сосуд, заполненный водой, отсчетный микроскоп.

1 Теоретическая справка

Испарение — переход вещества из жидкого в газообразное состояние на свободной поверхности жидкости.

Для выхода из жидкости молекуля должны совершить работу против сил молекулярного сцепления, внешнего давления, для чего должны обладать достаточной кинетической энергией. Переход части быстрых молекул в пар сопровождается потерями энергии, следовательно, и охлаждением жидкости.

Молярная теплота испарения (парообразования) — количество теплоты, необходимое для изотермического испарения одного моля жидкости при внешнем давлении, равном упругости ее насыщенных паров.

В настоящей работе для определения теплоты испарения применен косвенный метод, основанный на формуле Клапейрона-Клаузиуса:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{L}{T(V_2 - V_1)}\tag{1}$$

P – давление насыщенного пара жидкости при температуре T,

Т – абсолютная температура жидкости и пара,

L — теплота испарения жидкости,

 V_2 – объем пара,

 V_1 – объем жидкости.

	$T_{\text{кип}},$	V_1 ,	V_2 ,	b,	a,	a/V_2^2 ,
Вещество		10^{-6}	10^{-3}	10^{-6}		
	K	<u>м</u> 3 моль	<u>м</u> 3 моль	<u>м</u> 3 моль	$\frac{\Pi \mathbf{a} \cdot \mathbf{m}^6}{\mathbf{monb}^2}$	кПа
Вода	373	18	31	26	0,4	0,42
CCl ₄	350	97	29	126	1,95	2,3
Этиловый эфир	307	104	25	137	1,8	2,9
Этиловый спирт	351	58	29	84	$1,\!2$	1,4

Таблица 1: Табличные данные

Найдя из опыта dP/dT, T, V_2 и V_1 , можно определить L путем расчета. Величины L, V_2 и V_1 в формуле (1) должны относиться к одному и тому же количеству вещества; мы будем относить их к одному молю.

Измерения проводятся при давлениях ниже атмосферного.

Из табличных данных видно, что V_1 не превосходит 0.5% от V_2 .

Обратимся теперь к V_2 , которое в дальнейшем будем обозначать V. Объем V связан с давелнием и темературой уравнением Ван-дер-Ваальса:

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT
\tag{2}$$

Из рассмотрения таблицы (1) следует, что b одного порядка с V_1 . В уравнении Ван-дер-Ваальса величиной b следует пренебречь. Пренебрежение членом a/V^2 по сравнению с P вносит ошибку менее 3%. При давлении ниже атмосферного ошибки становятся еще меньше.

Таким образом, при давлениях ниже атмосферного уравнение Ван-дер-Ваальса для насыщенного пара мало отличается от уравнения Клапейрона. Положим поэтому

$$P = \frac{RT}{V} \tag{3}$$

Подставляя (3) в (1) и разрешая уравение относительно L, получаем:

$$L = \frac{RT^2}{P} \frac{dP}{dT} = -R \frac{d(\ln P)}{d(1/T)} \tag{4}$$

Эта формула является окончательной.

2 Экспериментальная установка

Схема установки изображена на рисунке (1).

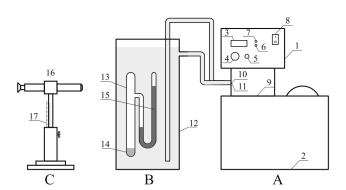


Рис. 1: Схема установки для определения теплоты испарения

- 12. Емкость, заполненная водой.
- 13. Запаянный прибор с исследуемой жидкостью (14). Перед заполнением исследуемой жидкости воздух из запаянного прибора был удалён, так что над жидкостью находится только её насыщенный пар.
- 14. Исследуемая жидкость.
- 15. Ртутный манометр, соединённый с ёмкостью (13).
- 16. Отсчётного микроскопа, настраиваемого последовательно на нижний и верхний уровни столбика ртути манометра.
- 17. Штангенциркуль.

В эксперименте T и P определяются термостатом и разницей высот ртутных столбов, соответственно. Производные $\frac{dP}{dT}$ и $\frac{d(\ln P)}{d(\frac{1}{T})}$ можно найти из углового коэффициента касательной к графику P(T) или как коэффициент наклона прямой на графике с осями $\ln P$ и $\frac{1}{T}$.

3 Ход эксперимента

1. При начальных условиях измерим разность уровней в ртутном U-образном манометре три раза с помощью микроскопа. Для этого на одном из менисков установим значение нуля, и измерим модуль значения второго мениска. С помощью термостата измерим температуру до и после начала этих трёх измерений. Полученные значения занесём в таблицу (2).

T_0^1 , °C	T_0^2 , °C	Δh_1 , mm	Δh_2 , mm	Δh_3 , MM	Δh , mm	dh, mm	P_0 , Π a
18.67	18.79	18.32	17.03	16.95	17.43	0.6	4651

Таблица 2: Начальные измерения

Заметим, что измерения для расчета значения давления и температуры в этой точке были выполнены, когда установка пришла в состояние равновесия не до конца, отчего значения получились недостаточно точными. Поэтому при обработке результатов измерений эта точка учитываться не будет.

2. Включим термостат. Будем подогревать воду в калориметре, повышая температуру с 20°С до 40°С. Измерим температуру и разницу уровней менисков аналогичным образом. Рассчитаем среднюю температуру, среднюю разницу уровня ртути, а также их погрешности. Результаты занесём в таблицу (3).

$T_1, {}^{\circ}C$	T_2 , °C	T, ° C	dT, °C	$\varepsilon_T,\%$	h_1 , MM	h_2 , MM	h_3 , MM	h, MM	dh, mm	$\varepsilon_h,\%$
20.07	20.02	20.05	0.04	0.10	16.17	17.41	16.82	16.80	0.4	2.5
21.00	21.01	21.00	0.03	0.02	18.20	18.60	19.00	18.60	0.3	1.4
22.07	22.04	22.06	0.03	0.07	19.75	19.66	19.33	19.58	0.2	0.9
23.02	23.04	23.03	0.03	0.04	21.26	21.28	21.35	21.30	0.1	0.2
23.99	24.01	24.00	0.03	0.04	22.92	22.53	23.18	22.88	0.2	1.0
25.02	25.03	25.03	0.03	0.02	24.64	24.40	24.42	24.49	0.1	0.4
25.99	26.01	26.00	0.03	0.04	25.45	25.82	25.95	25.74	0.2	0.8
27.00	27.00	27.00	0.03	0.00	27.79	27.30	27.06	27.38	0.3	1.0
28.04	27.99	28.02	0.04	0.09	28.97	28.79	28.80	28.85	0.1	0.3
29.01	29.01	29.01	0.03	0.00	30.82	30.65	30.68	30.72	0.1	0.2
30.04	30.02	30.03	0.03	0.00	32.60	32.57	32.52	32.56	0.1	0.0
31.00	31.01	31.01	0.03	0.00	33.37	33.34	33.55	33.42	0.1	0.0
32.08	32.04	32.06	0.04	0.00	35.83	35.64	35.93	35.80	0.1	0.0
33.04	33.02	33.03	0.03	0.00	37.43	37.70	37.51	37.55	0.1	0.0
34.04	34.02	34.03	0.03	0.00	39.36	39.57	39.40	39.44	0.1	0.0
35.01	35.00	35.01	0.03	0.00	42.60	42.14	42.62	42.45	0.2	0.0
35.98	35.99	35.99	0.03	0.00	43.96	43.82	43.54	43.77	0.2	0.0
37.00	37.01	37.01	0.03	0.00	46.00	46.16	46.55	46.24	0.2	0.0
37.99	38.00	38.00	0.03	0.00	49.62	49.90	49.26	49.59	0.2	0.0
39.01	39.02	39.02	0.03	0.00	51.83	52.04	51.96	51.94	0.1	0.0
40.01	40.00	40.01	0.03	0.00	53.72	53.83	53.95	53.83	0.1	0.0

Таблица 3: Измерения при нагреве, их погрешности

3. Рассчитаем давление, $\ln P$, $1/T_K$, их погрешности. Занесем полученные значения в таблицу (4).

Построим графики в координатах T, P (2) и в координатах 1/T, lnP (3).

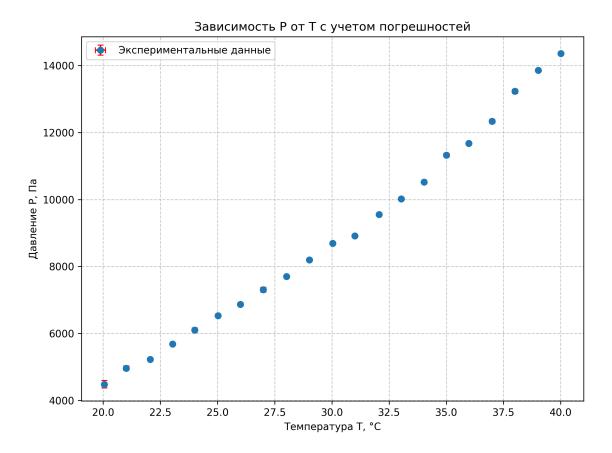


Рис. 2: График зависимости P(T)

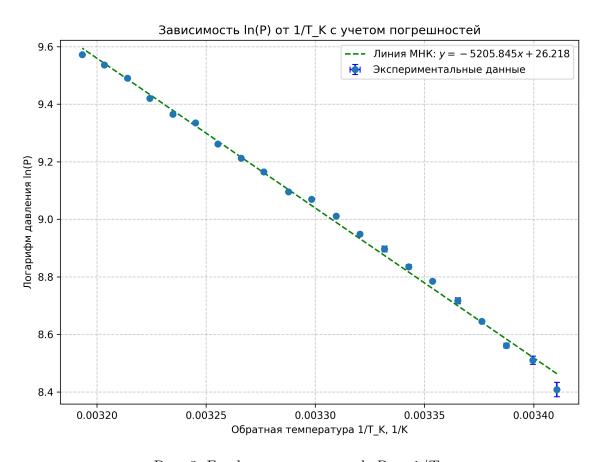


Рис. 3: График зависимости $\ln P$ от $1/T_K$

<i>P</i> , Па	dP , Πa	$T, \circ C$	$dT, \circ C$	$\ln P$	$d(\ln P)$	$\frac{1}{T}, \mathrm{K}^{-1}$	$d\left(\frac{1}{T}\right), K^{-1}$
4482	110	20.05	0.04	8.41	25.0	3.411	0.007
4963	70	21.00	0.03	8.51	14.3	3.400	0.005
5224	40	22.06	0.03	8.56	8.51	3.387	0.005
5682	9	23.03	0.03	8.64	1.67	3.376	0.004
6104	60	24.00	0.03	8.72	10.1	3.365	0.004
6533	30	25.03	0.03	8.78	4.17	3.354	0.004
6868	50	26.00	0.03	8.84	7.51	3.343	0.004
7306	70	27.00	0.03	8.90	9.90	3.332	0.004
7698	20	28.02	0.04	8.95	2.69	3.320	0.005
8196	20	29.01	0.03	9.01	2.24	3.310	0.004
8688	8	30.03	0.03	9.06	2.59	3.298	0.003
8917	30	31.01	0.03	9.10	2.98	3.288	0.004
9552	30	32.06	0.04	9.16	2.72	3.276	0.003
10018	30	33.03	0.03	9.21	2.14	3.266	0.003
10524	30	34.03	0.03	9.26	4.92	3.255	0.003
11327	60	35.01	0.03	9.34	3.55	3.245	0.003
11680	40	35.99	0.03	9.37	4.52	3.235	0.003
12337	60	37.01	0.03	9.42	4.48	3.224	0.003
13233	60	38.00	0.03	9.49	1.45	3.214	0.003
13860	20	39.02	0.03	9.54	1.44	3.203	0.003
14364	20	40.01	0.03	9.57	33.9	3.193	0.006

Таблица 4: Таблица данных $P, T, \ln P, 1/T$ и их погрешностей

- 4. Несмотря на методические рекомендации, по совету нашего преподавателя было принято решение измерения при охлаждении жидкости не проводить.
- 5. Вычислим L, пользуясь формулой (4) и данными, полученными сначала из одного, а потом из другого графика. Сравним результаты, оценим ошибку измерений.

4 Результаты измерений и их обработка

См. таблицы выше.

$$ho_{Hg}=13600~{
m kr/m^3}-$$
 плотность ртути $P=2
ho_{Hg}g\Delta h,$ где $\Delta h=h_2-h_1-$ разность высот столбов ртути

Графики зависимости давления от температуры представлены на рисунках (2) и (3).

Найдем молярную теплоемкость жидкости двумя способами.

Метод 1. Линейная зависимость $\ln P$ от $1/T_K$

Найдем угловой коэффициент $k=\frac{d(\ln P)}{d(1/T)}$ графика (3) с помощью метода наименьших квадратов.

$$k = \frac{d(\ln P)}{d(1/T)} = \frac{\langle \frac{1}{T} \ln P \rangle - \langle \frac{1}{T} \rangle \langle \ln P \rangle}{\langle \frac{1}{T^2} \rangle - \langle \frac{1}{T} \rangle^2} = -5205.51 \ K \approx -5200 \ K$$
 (5)

$$dk = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle (\ln P)^2 \rangle - \langle \ln P \rangle^2}{\langle \frac{1}{T^2} \rangle - \langle \frac{1}{T} \rangle} - k^2} = 63.83 \ K \approx 70 \ K \tag{6}$$

$$\varepsilon_k = \left| \frac{dk}{k} \right| = 0.012 \tag{7}$$

$$k = -5200 \pm 70K \qquad (1,2\%) \tag{8}$$

Вычислим молярную теплоту испарения вещества L, пользуясь формулой (4):

$$L = -kR = 43279 \frac{\text{Дж}}{\text{моль}} \tag{9}$$

Пользуясь $\varepsilon_k = \varepsilon_L$:

$$dL = |\varepsilon_L L| = 530 \frac{\text{Дж}}{\text{МОЛЬ}} \approx 600 \frac{\text{Дж}}{\text{МОЛЬ}}$$
 (10)

Итак,

$$L = 43300 \pm 600 \frac{\text{Дж}}{\text{модь}} \qquad (1,2\%) \tag{11}$$

Mетод 2. Зависимость P от T

Из графика (2) заметно, что зависимость не линейная.

Вычислим значения теплоты испарения L в каждой точке графика, за исключением крайних. Для каждой такой точки построим касательную, приблизив кривую зависимости P(T) параболой, построенной по этой точке и двум ближайшим к ней (т.е. соседним).

Заметим, что значения температуры в точках графика меняется на одну и ту же величину с каждым следующим измерением, благодаря чему соответствующая секущая — прямая, проходящая через соседние к данной точки графика, — параллельна касательной.

Найдем угловой коэффициент секущей и его погрешность:

$$k_i = \frac{dP}{dT} = \frac{P_{i+1} - P_{i-1}}{T_{i+1} - T_{i-1}} \tag{12}$$

$$\varepsilon_{k_i} = \varepsilon_{P_{i+1}} + \varepsilon_{P_{i-1}} + 2\varepsilon_{T_{i+1}} + 2\varepsilon_{T_{i-1}} \tag{13}$$

Для каждой точки подставим значение углового коэффициента секущей в уравнение (4) и вычислим теплоту испарения L и её погрешность:

$$L_i = \frac{RT_i^2}{P_i} \left(\frac{dP}{dT}\right)_i = \frac{RT_i^2}{P_i} k_i \tag{14}$$

$$\varepsilon_{L_i} = \varepsilon_{k_i} + 2\varepsilon_{T_i} + \varepsilon_{P_i} \tag{15}$$

$$dL_i = \varepsilon_{L_i} L_i \tag{16}$$

Полученные значения занесем в таблицу (5).

Найдем среднее значение теплоты испарения на данном диапазоне и ее случайную погрешность.

$k_i, \frac{\prod a}{K}$	$L_i, \frac{Дж}{моль}$	$dL, \frac{\mathcal{I}_{\mathcal{M}}}{\mathcal{M}\mathcal{O}\mathcal{I}\mathcal{B}}$	ε_{L_i} , %	$L \pm dL, \frac{\coprod \times}{\text{МОЛЬ}}$	T, K
369.05	53493	2900	5.4	53493 ± 2900	294.16
355.34	49277	1480	3.0	49277 ± 1480	295.21
452.27	58045	1480	2.5	58045 ± 1480	296.18
426.66	51312	1070	2.1	51312 ± 1070	297.15
382.01	43218	1150	2.7	43218 ± 1150	298.18
391.35	42394	1110	2.6	42394 ± 1110	299.15
412.28	42262	1050	2.5	42262 ± 1050	300.15
442.51	43342	860	2.0	43342 ± 860	301.17
491.29	45500	470	1.0	45500 ± 470	302.16
361.57	31801	310	1.0	31801 ± 310	303.18
425.44	36694	390	1.1	36694 ± 390	304.16
543.77	44086	560	1.3	44086 ± 560	305.21
493.48	38391	450	1.2	38391 ± 450	306.18
662.91	49413	660	1.3	49413 ± 660	307.18
590.99	41189	580	1.4	41189 ± 580	308.16
504.76	34335	560	1.6	34335 ± 560	309.14
772.62	50085	790	1.6	50085 ± 790	310.16
757.57	46079	630	1.4	46079 ± 630	311.15
562.87	32902	340	1.0	32902 ± 340	312.16

Таблица 5: Значения k_i , L_i и их погрешностей

$$\langle L \rangle = 43885,11 \frac{\text{Дж}}{\text{модь}} \approx 43900 \frac{\text{Дж}}{\text{модь}}$$
 (17)

$$d\langle L \rangle = \langle dL \rangle = 886,11 \frac{\text{Дж}}{\text{моль}} \approx 900 \frac{\text{Дж}}{\text{моль}}$$
 (18)

$$\varepsilon_{\langle L \rangle} = \frac{d\langle L \rangle}{\langle L \rangle} \approx 2.1\%$$
 (19)

Для визуализации полученных данных построим график L от T (4).

Значения сильно разбросаны, но можно заметить уменьшение значения молярной теплоты испарения L с ростом температуры T. Это позволяет предположить зависимость величины теплоты испарения от температуры.

5 Вывод

Все цели работы были достигнуты.

- 1. Значения давление насыщенного пара P при разных температурах T представлены в таблице (4).
- 2. По полученным данным вычислена величина теплоты испарения с помощью уравнения Клайперона-Клаузиуса (1) двумя способами: из линейного коэффициента зависимости $\ln P$ от $1/T_K$ и с помощью поиска касательной к графику P(T).

Согласно первому методу:

$$L = 43300 \pm 600 \frac{\text{Дж}}{\text{моль}}$$
 (1,2%)

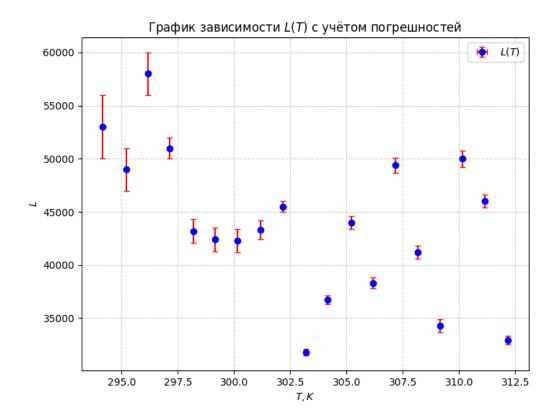


Рис. 4: График зависимости L(T)

Согласно второму методу:

$$\langle L \rangle = 43900 \pm 900 \frac{\text{Дж}}{\text{моль}}$$
 (2.1%)

Метод определения значения молярной теплоты испарения L с использованием углового коэффициента зависимости $\ln P$ от $1/T_K$ позволяет получить более точное значение L. Однако второй метод позволяет проследить зависимость L(T) и сделать вывод о её характере.